

Dermapen 4[®]

From the World's
#1 Microneedling Company



Ein Gerät.
Massgeschneiderte Lösungen.
Unendliche Möglichkeiten.

Steigen Sie um auf den Goldstandard im Bereich Microneedling

Dermapenworld

Holen Sie sich das All-in-One-Geschäftsmodell



Der Dermapen 4® ist ein elegantes, benutzerfreundliches Microneedlinggerät, das den höchsten Design- und Produktionsstandards entspricht.

Mit dem Dermapen 4 in Ihrer Klinik können Sie fortschrittliche Microneedling für jeden Hauttyp, jede Hautfarbe und jedes Hautproblem mit Zuversicht, Service und hervorragenden Patientenergebnissen anbieten.

Erweitern Sie Ihr Geschäft mit Dermapen 4



LIEFERN SIE AUSSERGEWÖHNLICHE ERGEBNISSE, DIE IHREN RUF STÄRKEN

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Patienten wiederkommen und Ihre Praxis weiterempfehlen.



BIETEN SIE MIT EINEM GERÄT MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

Behandeln Sie mehrere Hautprobleme gleichzeitig mit personalisierten Verfahren.



BLUETOOTH-KONNEKTIVITÄT

Sorgen Sie mit nahtlosen Software-Upgrades dafür, dass Ihr Gerät stets die beste Leistung bringt.



VISIONÄRE MARKETINGUNTERSTÜTZUNG

Werben Sie erfolgreich für Ihre Praxis und gewinnen Sie neue Patienten.



7 JAHRE GARANTIE FÜR SORGENFREIHEIT

Schützen Sie Ihre Investition mit einer branchenführenden Garantie.



FDA-, ISO13485- UND CE-ZERTIFIZIERT

CE FDA



Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten

Erleben Sie das schnellste und leistungsstärkste Microneedlinggerät auf dem Markt, das Ihnen Selbstvertrauen und Einfachheit bei jeder Behandlung verschafft. Dermapen 4® ermöglicht Ihnen, mehrere Hautprobleme gleichzeitig, schnell und effektiv zu behandeln.

Dank überragender Präzision, Qualität und Sicherheitsfunktionen werden Behandlungen in Rekordzeit durchgeführt, während Beschwerden minimiert werden. Geeignet für alle Hauttypen, Hauttöne und Hautprobleme – die Möglichkeiten sind wirklich unbegrenzt.



Holen Sie sich die ultimative Lösung für mehr Glanz für



Feine Linien
und Falten



Alterung/
Sonnenschäden



Akne
und Hautunreinheiten



Narben



Rosazea



Pigmentierung



Haarverlust



Vergrößerte Poren



Dehnungsstreifen

Gründe für ein Upgrade auf Dermapen 4®

Vor mehr als einem Jahrzehnt brachte DermapenWorld™ den ursprünglichen Dermapen in die Kliniken. Als weltweit erstes automatisiertes Microneedlinggerät revolutionierte es die Microneedlingsbranche.

Seitdem hat unser Netzwerk von Anbietern weltweit über 7 Millionen Dermapen-Behandlungen™ durchgeführt.



Ist es die richtige Wahl für Sie? Entdecken Sie, warum führende Kliniken sich für Dermapen 4® entscheiden.

✓ Präzision

Einstellung zur Narbenbehandlung, um das Erscheinungsbild von Narben deutlich zu verbessern. AOVN™-Rückhalteventile für exakte Nadeltiefen und reduzierten Widerstand.

Die Nadelkartusche mit integriertem RFID gewährleistet ein präzises, zuverlässiges und reibungsloses Eindringen der Nadel. Das elegante Digitaldisplay ermöglicht eine schnelle und einfache Anzeige und Änderung der Einstellungen.



✓ Qualität

Das Design mit 16 Nadeln schafft mehr verjüngende Kanäle für bessere Ergebnisse und mehr Komfort. Dual-Power-Betrieb für ultimativen Komfort und Leistungsfähigkeit. Überlegene AOVN™ 4-Technologie für mehr Geschwindigkeit, Leistung und Komfort.

✓ Sicherheit

Anti-Contamination Management ACM™ für unübertroffene Sicherheit und garantierten Schutz. Das ergonomische Design ermöglicht mühelose, reibungslose und komfortable Behandlungen.

✓ Geschäftspotenzial

Bieten Sie massgeschneiderte Lösungen mit einem Gerät, das mehrere Hautprobleme gleichzeitig behandeln kann. Dank Bluetooth-Konnektivität bleibt Ihr Gerät auf dem neuesten Stand. Visionäre Marketingunterstützung hilft Ihnen, Ihre Praxis zu bewerben und mehr Patienten zu gewinnen. Eine 7-jährige Garantie sichert Ihre langfristige Investition.

Mehr Präzision



Einstellung für die Narbenbehandlung

Verbessern Sie das Aussehen von Narben dramatisch

Die Narbenkorrektur ist ein lukrativer Markt, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Dermapen 4® ist das einzige Microneedlinggerät mit einer speziellen Einstellung für die Narbenbehandlung (ST) und Protokollen für die Korrektur von tiefen, atrophischen und hypertrophen Narben, einschliesslich Operationsnarben, Verbrennungsnarben, Dehnungsstreifen und Aknenarbenbehandlungen.

Die Nadeleindringtiefe kann bis zu 3,0 mm erreichen. Behandeln Sie mühelos und schnell Körperkonturen und verdicktes, fibröses Gewebe. Die Nadeltiefe kann für Kopfhaut, Augenlider und intime Körperbereiche in Schritten von 0,1 mm eingestellt werden.



AOVN™-Rückhalteventile

Exakte Nadeltiefen und reduzierter Widerstand

Spezielle Rückhalteventile entlasten den Überdruck innerhalb der Dermapen 4-Nadelkartusche und verhindern so die Ansammlung von Flüssigkeit im Inneren der Nadelkammer. Dieser vakuumähnliche Effekt minimiert das Kontaminationsrisiko und ermöglicht einen druckfreien Kontakt mit der Haut während der Behandlung.

Die regulierte Saugkraftentlastung sorgt dafür, dass pro Sekunde bis zu 1.920 Mikrokanäle reibungslos und ohne Widerstand erzeugt werden.

Die Unversehrtheit und Schärfe der Nadel bleiben stets gewährleistet, selbst bei grösseren Behandlungsbereichen.

AOVN-Vakuum-Rückhalteventile fördern ausserdem die Verfahrensgenauigkeit, die präzise und konsistente Ergebnisse unterstützt.



Integrierte RFID-Nadelkartusche

Gewährleistet effektive und exakte Verfahren

Diese patentierte bahnbrechende RFID-Technologie garantiert, dass die gewünschte Tiefe exakt erreicht wird, und sorgt für ein präzises, zuverlässiges und widerstandsfreies Eindringen der Nadel.

Durch die automatische Kalibrierung der Nadelkartusche mit dem Gerät werden alle Produktionsschwankungen oder Verschleisserscheinungen berücksichtigt. Dies gewährleistet die Zuverlässigkeit und Konsistenz des Verfahrens während der gesamten Lebensdauer Ihres Geräts.



Digitalanzeige. One-Touch-Workstation.

Einfaches Anzeigen und Ändern der Verfahrenseinstellungen

Das beleuchtete LED-Display zeigt die Behandlungstiefe, Geschwindigkeit und den Batteriestatus an. Sie können die Behandlungseinstellungen mit einem einfachen Knopfdruck ändern.

Geräte mit manueller Einstellung erreichen nicht die Präzision des Dermapen 4®, der eine ultrafeine Tiefeneinstellung ermöglicht in 0,1-mm-Schritte.

Der Digital-Servomotor passt Parameter wie Tiefe, Geschwindigkeit und Einstellung präzise an und sorgt so für aussergewöhnliche Genauigkeit.

Überragende Qualität



Revolutionäre 16-Nadel-Kartusche

Grössere Bereiche schneller behandeln

Die visionäre 16-Nadel-Kartusche von Dermapen 4® erzeugt 1.920 Punktionskanäle pro Sekunde – über 100 % mehr als gefälschte Nadelstifte – für schnellere Behandlungen und mehr Komfort für den Patienten.

Die 33-Gauge-Nadeln aus medizinischem Edelstahl sind gamma-sterilisiert und oszillieren mit bis zu 120 Umdrehungen pro Sekunde, was einer unübertroffenen Drehzahl von 7.200 U/min entspricht. Kein anderes Gerät auf dem Markt kommt auch nur annähernd an diese Leistung heran.

Nur Dermapen 4 eröffnet mehr Wege, um die Hautregeneration und die hervorragende Infusion von Wirkstoffen in Dp Dermaceuticals Meso-Glides™ zu fördern. Tests haben gezeigt, dass diese Mikrokanäle bis zu 80 % mehr topische Nährstoffe in die Haut transportieren.

Mit seiner patentierten Technologie bietet die Dermapen 4-Nadelkartusche eine gespreizte und gewellte Oberfläche, die über die Haut gleitet. Die ISO-geometrische Anordnung aller 16 Nadeln in einem einzigen Kartuschenkopf wurde von einem Team von Industriedesignern sorgfältig entworfen und in monatelangen strengen Tests getestet, um aussergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen.



Dualer Antrieb

Ultimativer Komfort und Leistungsfähigkeit

Herkömmliche Batterien verlieren allmählich an Leistung, was zu ungleichmässigen Ergebnissen und einem Ziehen der Haut führt.

Der Dermapen 4 bietet ein fortschrittliches Lithium-Turbo-Cut-Batteriesystem, das die gleiche Leistung wie Netzstrom erbringt. Dies gewährleistet eine volle und konstante Leistung während der gesamten Lebensdauer der Batterie.

Eine Batterie kann bis zu 90 Minuten echte Betriebszeit bei voller Leistung liefern und über 8 Stunden Standby-Zeit.

Der Dermapen 4 kann auch mit herkömmlichem Netzstrom betrieben werden und verfügt über ein 3,5 Meter langes Kabel für zusätzlichen Komfort.




Fortschrittliche Oscillating Vertical Needle™ (AOVN)-Technologie

Unglaublich schnelles und leistungsstarkes Microneedling

Die Nadeln des Dermapen 4® bewegen sich in einer präzisen Auf- und Abbewegung und bieten so eine höhere Geschwindigkeit, Kraft und Präzision.


Sein direkter Digitalantrieb übertrifft die herkömmliche Federtechnologie, was eine schnellere Nadelbewegung und kürzere Behandlungszeiten bedeutet. Die automatische Kopplung der Kartusche mit dem Dermapen 4-Handstück maximiert die Leistung, während die digital gesteuerte Nadelbewegung eine aussergewöhnliche Genauigkeit für hervorragende Ergebnisse gewährleistet.

Die schnelle und präzise vertikale Nadelung minimiert Hauttraumata und Beschwerden für den Patienten und sorgt für einen unglaublichen Glanz ohne Ausfallzeiten. In vielen Fällen ist keine betäubende Creme erforderlich.

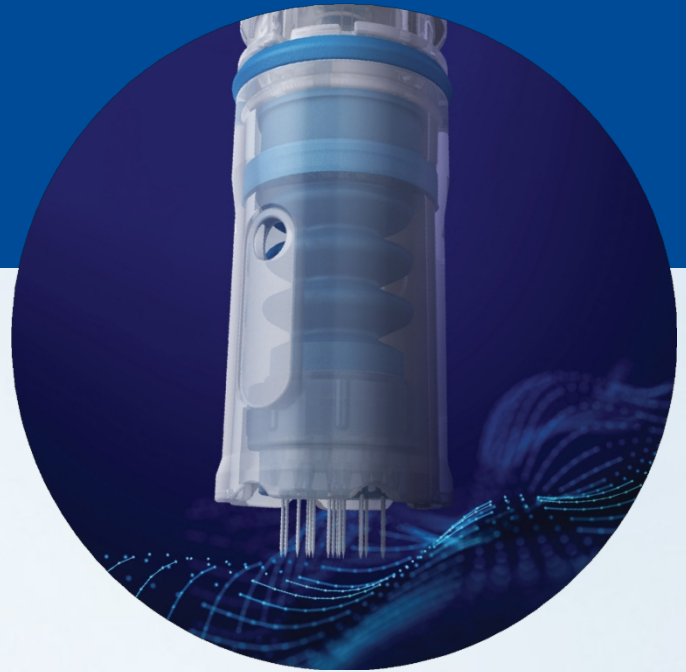

Dermapen 4

Dermaroller

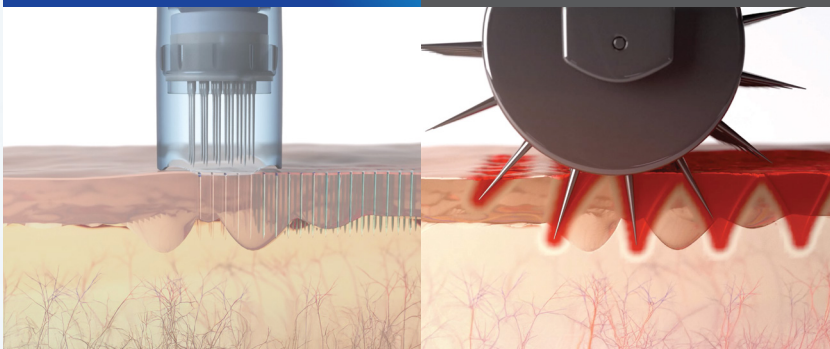

Mehr Sicherheit



Anti-Contamination Management™ (ACM™)

Bieten Sie das sicherste Gerät aller Zeiten an

Nur die gamma-sterilisierten Nadelkartuschen von Dermapen 4® verfügen über eine einzigartige Silikondichtung in medizinischer Qualität und einen Flüssigkeitsschutz. Die äussere Kartusche ist mit einem speziellen Flüssigkeitsschutz versehen, der eine Kreuzkontamination der äusseren Kartuschenhülle verhindert.

Diese fachmännisch entwickelte, patentierte Anti-Kontaminations-Technologie verhindert den internen und externen Rückfluss von Behandlungsflüssigkeiten, selbst bei den anspruchsvollsten Eingriffen.

Die ACM-Technologie ist weltweit einzigartig und exklusiv für Dermapen 4 erhältlich. Sie garantiert keine Kreuzkontaminationsrisiken für optimale Patientensicherheit.

Massgeschneiderte sterile Hüllen für Dermapen 4 unterstützen zusätzlich eine sterile Arbeitsumgebung.



Ergonomisches Design

Einfache Anwendung im Gesicht, am Körper oder auf der Kopfhaut

Dermapen 4 ist so leicht und ergonomisch, dass er wie ein schwereloser Handschuh sitzt.

Das schlanke Design sorgt für eine ergonomische Gewichtsverteilung. Er liegt gut in der Hand, sodass weniger Druck und Griffkraft erforderlich sind, um die Nadel auf die Haut aufzubringen. Die bequeme Position reduziert die Ermüdung des Anwenders und erleichtert die Durchführung mehrerer aufeinanderfolgender Behandlungen.

Durch den geringeren Druck auf die Haut erleben Patienten einen erhöhten Komfort bei gleichzeitig maximalen Ergebnissen.

Von Tausenden von Ärzten empfohlen

“ Das Dermapen 4-Microneedlinggerät bietet eine unübertroffene Präzision, minimiert Gewebetraumata und ermöglicht mir eine sichere Behandlung in der Nähe der Augen. Mit einer Geschwindigkeit von 1920 Mikronadelungen pro Sekunde können wir das gesamte Gesicht in nur 10 Minuten mit minimalen Beschwerden behandeln. Unsere Patienten profitieren von nahezu schmerzfreien Sitzungen ohne Betäubungscreme, minimalen Ausfallzeiten und hervorragenden Ergebnissen bei Hautverjüngung, Pigmentierung und Narbenkorrektur, selbst nach nur einer Behandlung.“

Dr. Rachna Murthy ★★★★★
Fachärztin für Augenplastische und
Ästhetische Chirurgie



Dp DOCK™ hält Sie bereit

Das neue Dp DOCK™ wurde speziell für Hautpflegeexperten entwickelt und bietet ein Sync & Go-Konzept, das Dermapen-Behandlungen™ vereinfacht. Diese innovative Dockingstation sorgt dafür, dass Ihr Dermapen 4®-Gerät immer mit der neuesten Firmware ausgestattet ist, sodass Sie sich ganz auf die aussergewöhnliche Therapie Ihrer Kunden konzentrieren können.

Das Dp DOCK™ verfügt über klare Batteriestandsanzeigen, eine praktische Geräteaufbewahrung und integrierte Anschlüsse für Ladegeräte, sodass Sie Ihr Gerät auf einen Blick überwachen können. So sind Ihre Geräte immer einsatzbereit, was Ihre betriebliche Effizienz und die Zufriedenheit Ihrer Patienten erhöht.



Grösseres Geschäftspotenzial

Bieten Sie massgeschneiderte Lösungen mit einem Gerät

Behandeln Sie mehrere Hautprobleme gleichzeitig

Mit Dermanen 4® können Sie jedem Patienten mit Zuversicht helfen. Es ist Ihr All-in-One-Geschäftsmodell für jeden Hauttyp, jede Hautfarbe und jedes Hautproblem.

VON FACHLEUTEN EMPFOHLEN

Tausende Ärzte empfehlen unsere weltweit führende Technologie, die Ihren Patienten hilft, schnell jünger auszusehen, ohne Nebenwirkungen oder Ausfallzeiten.

BEWÄHRTE PROTOKOLLE

Diese Protokolle sind exklusiv für unsere autorisierten Behandlungsanbieter verfügbar und bieten Schritt-für-Schritt-Anleitungen für eine echte Dermanen-Behandlung™.

SYNERGIE DER LÖSUNGEN

Holen Sie sich alles, was Ihre Klinik braucht, um erfolgreich zu sein, aus einer Hand. Alle unsere Verfahren und Produkte sind so konzipiert, dass sie zusammenwirken und optimale Ergebnisse erzielen.



Marketingunterstützung

Gewinnen Sie mehr Patienten für Ihre Klinik

WERDEN SIE ANERKANNT

Erhalten Sie eine Plakette als autorisierter Behandlungsanbieter, exklusive Marketingmaterialien, POS-Tools und eine Klinikzertifizierung, um die Glaubwürdigkeit Ihrer Klinik zu stärken.

VORRANGIGE AUFNAHME

Nur Dermanen 4-Anbieter erhalten eine vorrangige Listung im Klinikfinder von DermanenWorld. Patienten, die nach echten Dermanen-Behandlungen suchen, werden direkt zu Ihnen weitergeleitet.

KOSTENLOSE EXKLUSIVE MITGLIEDSCHAFT

Wenn Sie Ihr Gerät registrieren, erhalten Sie ausserdem Zugang zum speziellen Professional Portal mit allen Protokollen, Schulungen und Marketingunterstützung, die Sie benötigen, um die besten kommerziellen Ergebnisse zu erzielen.

Größeres Geschäftspotenzial



Bluetooth-fähige Konnektivität

Automatische Updates, niemals veraltet

Ihr Gerät bleibt auf dem neuesten Stand, da die Software bei Entdeckung neuer Technologien für Sie aktualisiert wird. Die DermapenWorld-App ist einfach zu bedienen und bietet folgende Funktionen:

- Komplette überarbeitete App-Architektur
- Verwenden Sie eine App für Dermapen 4 und Dermapen HOME™
- App-Bildschirme und Funktionen, die auf Ihr Konto und Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.
- Schrittweise Anleitung zur Einrichtung für neue Benutzer
- Anleitungsvideos auf jeder Einrichtungsseite

7 Jahre Garantie

Sichert Ihre langfristige Investition

Eine 7-jährige, vollständig übertragbare und uneingeschränkte Garantie, einschliesslich Ersatzteilen und Arbeitsaufwand, unterstützt Dermapen 4, das weltweit vertrauenswürdigste Gerät nach dem „Goldstandard“.



Die Ergebnisse sprechen für sich



Images courtesy of Chloe Ahmed, The Chelmsford Skin Clinic, Essex (UK)



Images courtesy of Doina Stefan, Skins Instituut



Images courtesy of DermapenWorld



Images courtesy of Chloe Ahmed, The Chelmsford Skin Clinic, Essex (UK)




Images courtesy of Dr Jenny Mathew, Lisa Skin Clinic, India



Images courtesy of Carly Knowles, Bella Pelle Clinic, Yarrowonga (Australia)

Ihre Praxis und Ihre Patienten verdienen den Goldstandard

Es gibt einfach keinen Vergleich zum Dermapen 4®; es ist das fortschrittlichste Microneedlinggerät auf dem Markt und bietet die schnellsten Mikronadelverfahren. Patienten genießen mehr Komfort sowie hervorragende, schnelle Ergebnisse.

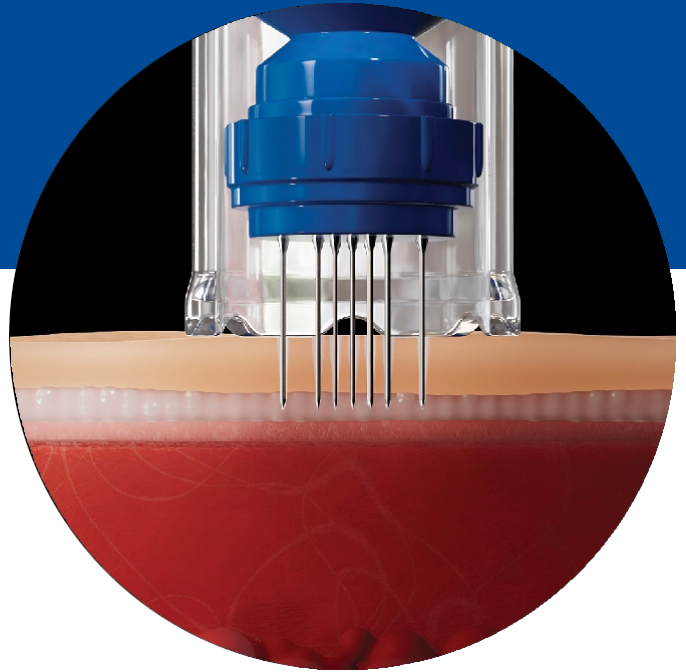

Die Einrichtung könnte nicht einfacher sein



1. Installieren Sie die App und erstellen Sie ein Konto



2. Fügen Sie die Daten Ihrer Klinik hinzu



3. Registrieren Sie Ihr Dermapen 4®-Gerät



4. Fahren Sie mit der Dermapen-Behandlung™ fort, indem Sie dem entsprechenden Protokoll

Geschäftliche Referenzen

Sie möchten eine Partnerschaft eingehen mit

- ✓ KEIN ANDERER PEN bietet schnellere oder bessere Ergebnisse.
- ✓ KEIN ANDERER PEN ermöglicht es Ihnen, den Markt für Narbenkorrekturen zu erschliessen und Ihren ROI zu maximieren.
- ✓ KEIN ANDERER PEN verbindet Ärzte mit einem weltweiten Netzwerk für Unterstützung und Weiterbildung.
- ✓ KEIN ANDERER PEN konkurriert mit der Sicherheit und dem Schutz, die Dermapen 4 bietet.
- ✓ KEIN ANDERER PEN bietet eine weltweite, vom Hersteller unterstützte 7-Jahres-Garantie.



Dermapenworld™

Wissenschaft. Synergie. Erfolg.

Vertrieb in der Schweiz:



LASERMED SA - Innovating Medicine

info@laserméd.ch | www.laserméd.ch

Frohheimstrasse 2 | 9325 Roggwil TG Rte André-Piller 18 | 1762 Givisiez FR
Tel. 071 454 70 30 | Fax 071 454 70 34 Tél. 026 466 38 15 | Fax 026 466 38 16